



## PRVA UPORABA

1

Izvalcite zaščitni listek.

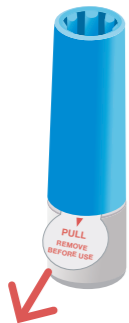

2

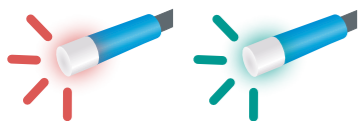

2x

Ob prvem vklopu nastavek zasveti rdeče, zeleno, rdeče, zeleno, kar sporoča pravilno delovanje.

3



30 s

Po vklopu preide nastavek v stanje mirovanja za 30 s. V tem času nastavek namestite na zobno ščetko.

4



Nastavek namestite na zobno ščetko in ga potisnite do konca.


## DELOVANJE

1



Začnite ščetkati zobe.


2

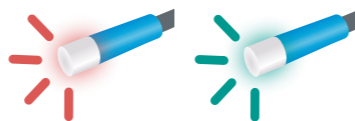

1x


Nastavek se avtomatično vklopi. Zasveti rdeče, zeleno in začne spremljati vaše gibe pri ščetkanju.

3

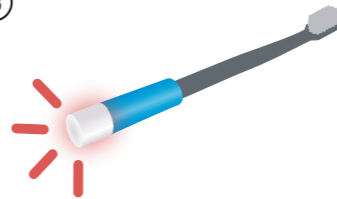

Med uporabo nastavek utripa rdeče (vsake 3 s), s čimer oznanja pravilno zaznavanje ščetkanja.


4

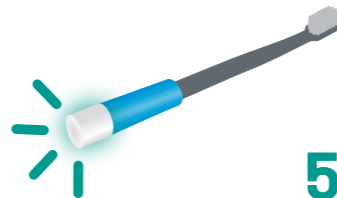

5x

Po uspešno zaključenem ciklu ščetkanja nastavek 5x zasveti zeleno.

5

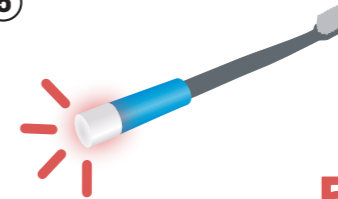

5x

Ob predčasni prekinitvi ali neuspešnem ciklu ščetkanja, npr. ščetkanje ni trajalo dovolj časa, nastavek 5x zasveti rdeče.

6



30 s

Po uspešnem ali neuspešnem ščetkanju se nastavek izklopi za 30 s. V tem času ščetko očistite ter pospravite.

Preprosto do boljših navad pri ščetkanju zob.

Spremljajte nas na



@vittasmilegadget



@vitta\_smile


Za več informacij obiščite našo spletno stran

vitta-smile.si


## STARŠEVSKI NADZOR




V 30 minutah po zaključenem ciklu ščetkanja je mogoče preveriti status zadnjega cikla.

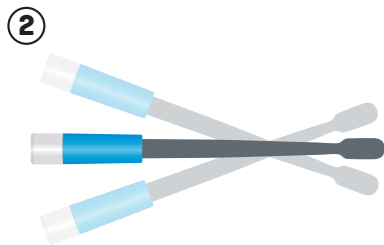

Starševski nadzor aktivirate tako, da močneje potresete nastavek.

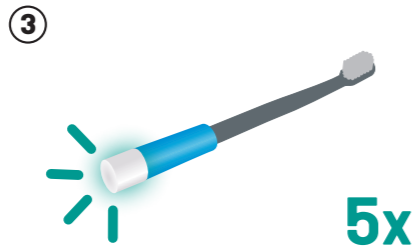

Če nastavek 5x zasveti **zeleno**, je bil zadnji cikel uspešno zaključen.

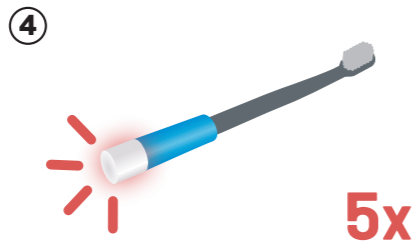


Če nastavek 5x zasveti **rdeče**, je bil zadnji cikel neuspešno zaključen.

## MENJAVA BATERIJ




Nastavek mora biti pred menjavo baterij popolnoma suh.

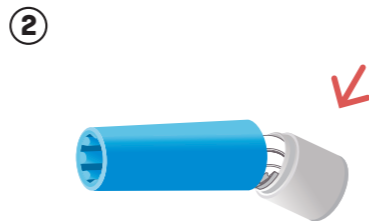


Odstranite mehkejši del nastavka tako, da ga potisnete pravokotno od nastavka. Pri tem boste slišali klik.



Previdno izvlecite bateriji.

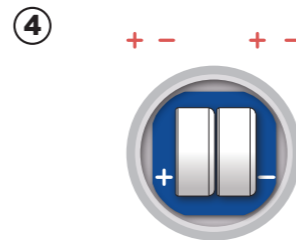

Ob vstavljanju novih baterij preverite pravilno postavitev.

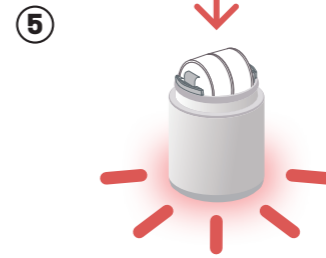

Vstavite novi bateriji in pritrdite mehkejši del na nastavek. Pri tem boste slišali klik.

### POTREBUJETE DODATNO POMOČ?



Posneta QR koda vam bo odprla:

[vitta-smile.si/faq](https://vitta-smile.si/faq)

# Vitta Smile

## NAVODILA ZA UPORABO SLOVENŠČINA

Navodila shranite  
na varno mesto.